

Mini 系列离心机

/// 离心机系列


/// 产品介绍

迷你离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备两种离心转子和多种试管套，适用于 2.0ml, 1.5ml, 0.5ml, 0.2ml 离心管和 PCR 用 0.2ml, 8 联排离心管。人性化设计，具有开盖暂停功能，合盖即自动在原时间继续运行，并具备电子设定功能。全透明圆形上盖，方便观察机器运行状况，充分体现以人为本，服务科研的全新理念。



/// 产品特点

- 大半径 8 孔位转子设计，同转速下离心力比普通转子提高 1.5 倍；
- 上盖开关外凸设计，按下开关上盖自动弹开，方便单手操作；
- 独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；
- 配置 LED 显示屏，显示转速和设定时间，更加科学严谨；
- 超低噪音，运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠；
- 外形精致小巧，一机多用，满足多种实验需求。

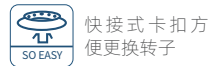

应用范围

- 全血中提取血清
- 各种样品提取上清液
- 样品快速沉淀
- PCR 实验分区离心
- 微生物样品处理
- 微量血细胞分离

/// 产品技术参数

型号	Mini-4K	Mini-6K	Mini-7K	Mini-10K	Mini-12K	Mini-10K+
转速	4000rpm	6000rpm	7000rpm	10000rpm	12000rpm	3000-10000rpm
相对离心力	约 860xg	约 2000xg	约 2600xg	约 5400xg	约 7800xg	约 500-5400xg
样品处理量	8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml 离心管、2×8×0.2ml PCR 离心排管					
定时范围	1~99m59s					
工作噪声	≤ 45dB			≤ 55dB		
外形尺寸 (W×D×H)	160 x 176 x 121 (mm)					
重量	≤ 1.5kg					
输入电源	220V/110V 50-60Hz					

转子配件



/// 八连排转子
规格：2×8×0.2ml



/// 8 孔位转子
规格：8×2.0ml/1.5ml



/// 离心管套
规格：0.5ml 离心管套